


吸入のおくすりについて、吸入服薬情報提供書

ID又はカルテ番号 _____

おくすりの名前	吸入回数	1本の使用可能回数
	1回 吸入、1日 回	約 回、約 日分
	1回 吸入、1日 回	約 回、約 日分

★おくすり(ボンベ)と吸入補助器具

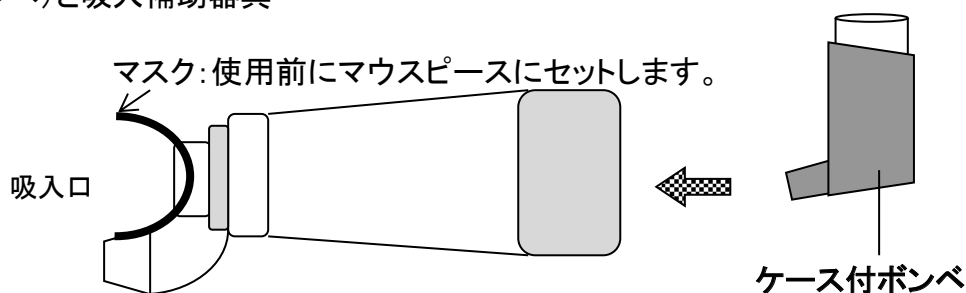

★正しい吸入の仕方 (ウィークポイントにチェックしています)

手順	気をつけること
① 吸入補助器具を準備します。	補助器具は、(オブティチャンバーダイヤモンド・マスク付)です。
② おくすり(ボンベ)をよく振り、補助器具にはめ込みます。	1回ごとによく振ってください。 ※ボンベの中は「おくすり」と「ガス」に別れています。
③ ボンベを(1)回押しします。	必ず1回だけにしてください。
④ 吸入前に息を吐きます。	苦しくない程度まで息を吐き出します。
④ マスクで鼻と口を覆います。	鼻と顎に添えてフィットさせてください。
⑥ 息(おくすり)を吸い込みます。	警告音が鳴らない速さで、ゆっくり吸い込んでください。
⑦ 吸入口から口をはずし、5~10秒ほど息を止めます。	軽く息を止め、口をはずし、できるだけ長く息を止めます。 ※すぐに息を吐き出したり、口を開けたままにすると、おくすりがすぐに出てしまうため。
⑧ 息を鼻からしずかに吐きます。	
⑨ 補助器具内のおくすりを完全に吸い込むまで、④~⑧をくり返します。	※吸入量に応じて2回以上繰り返します。
⑩ 吸入後は、必ずうがいをします。	1回吸入するたびに、うがいをしてください。 ※口の中におくすりがあると、のどや口の中にカビが生えたり、声がかれたりすることがあるため。

きちんと吸入し、発作や息切れの悪化を予防しましょう!

連絡事項

保険調剤薬局名 _____